

测试报告

样品信息			
样品名称	果葡糖浆	编号	W20140909-004
样品重量	\	剂型	\
收样日期	2014/09/09	测试期间	2014/09/17-09/17
样品描述	无色透明粘稠状液体		
测试需求			
测试成分	含量测定		
参考标准			
参考标准	客户标准	标样	无
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	安捷伦 1260

● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Xtimate®Sugar-Ca (7.8*300mm , 5μm)
流动相:	水
检测波长:	示差检测器
柱温:	柱温 : 85℃ ; 检测器 : 45℃
流速:	0.5ml/min
进样量:	10μl
注意事项:	/

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:浙江省金华市仙源路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

邮编: 321000

Tel:400-808-6760

E-mail:Houcaizhang@welchmat.com

● 流动相配置:

流动相: 水;


● 对照溶液的配置:

供试品溶液: 称取供试品 0.15g 置 10ml 容量瓶中, 加水稀释至刻度, 摇匀, 用 0.22um 滤膜过滤, 取续滤液作为供试品溶液;


空白溶液: 水;

● 谱图和数据:

1、空白:

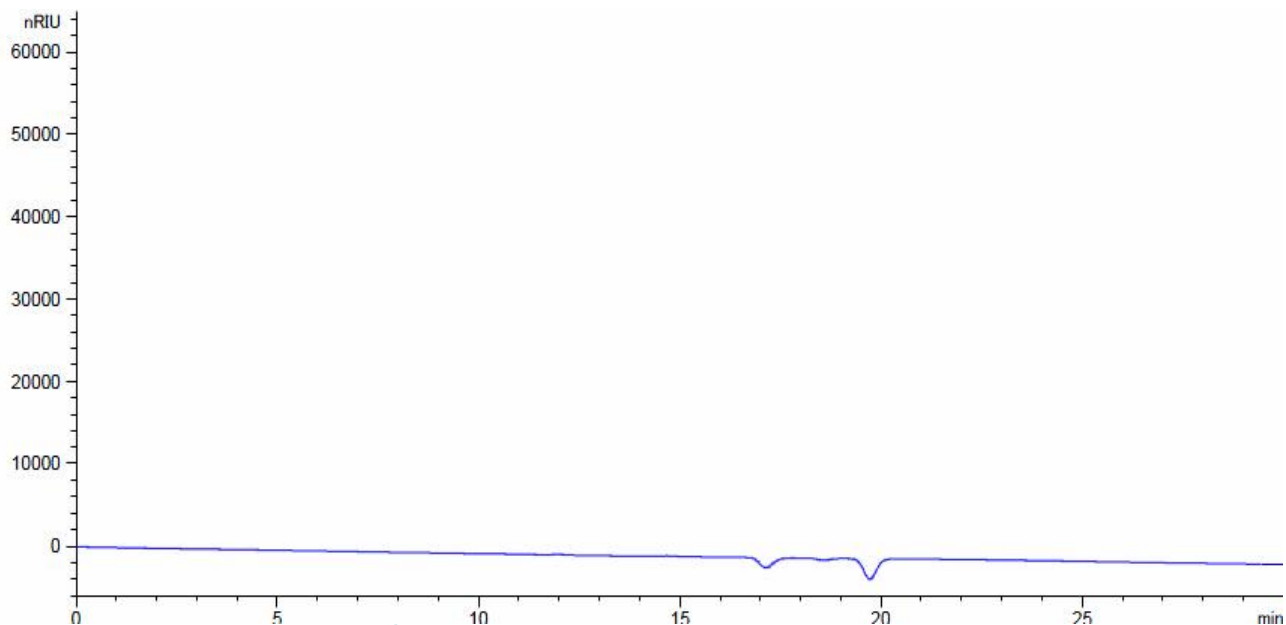

2、供试品溶液:

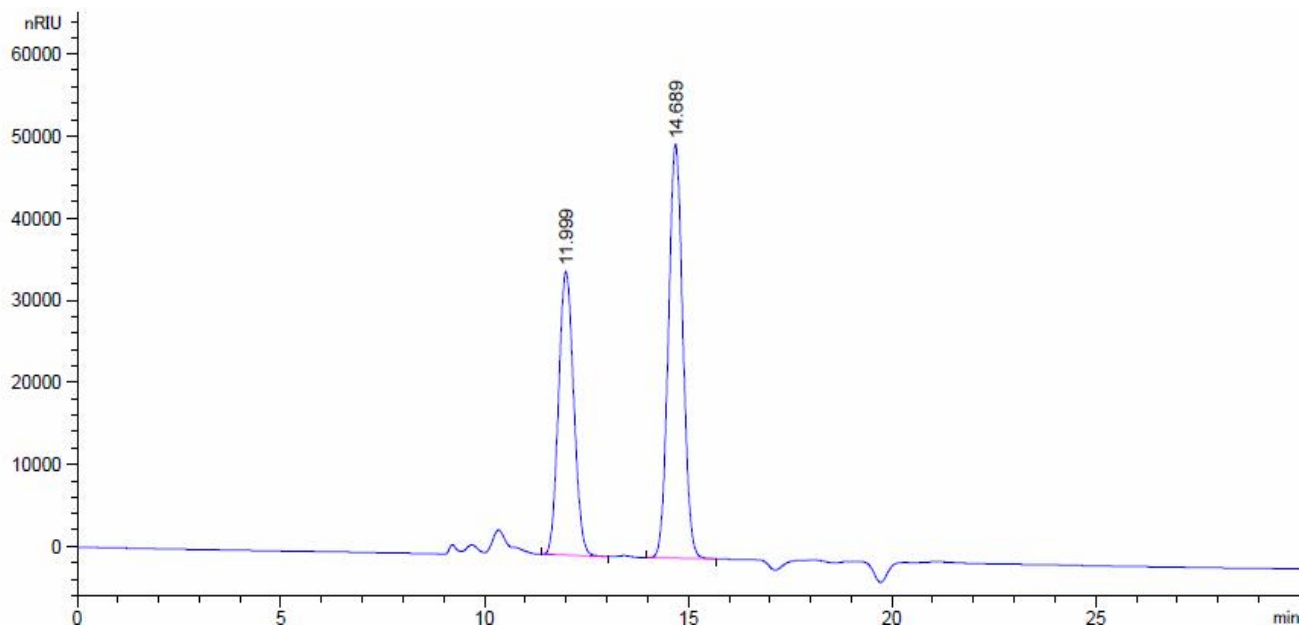

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市仙源路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

Tel:400-808-6760

邮编: 321000

E-mail:Houcaizhang@welchmat.com

保留时间 [min]	k'	峰面积 [nRIU*s]	峰高 [nRIU]	对称 因子	峰宽 [min]	塔板数	分离度	选择性
11.999	-	8.95906e5	3.46067e4	0.89	0.4032	4903	-	-
14.689	-	1.24462e6	5.04792e4	0.94	0.3780	8365	4.05	1.22

● 结论:

果葡糖浆在此色谱条件下, 用月旭 Xtimate®Sugar-Ca (7.8*300mm , 5 μ m) 色谱柱检测, 主成份与杂质均可分离。

报告签字

测试: 郭德勇

日期: 2014-9-17

审核: 薛昆鹏

日期: 2014-9-17